

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

INSTRUCTIE VOOR AFNAME* EN VERZENDING

Laboratoria voor Pathologie

I www.pathologie-dna.nl

E info@pathologie-dna.nl

locatie Den Bosch

Postbus 90153

5200 ME 's-Hertogenbosch

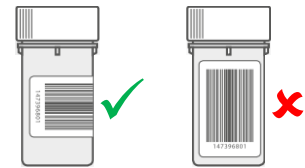
T 073 553 2750

F 073 553 2800

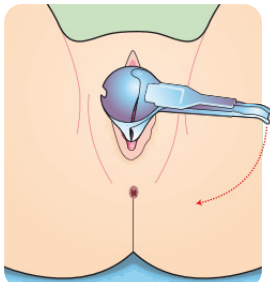
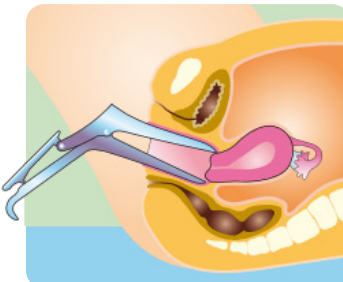
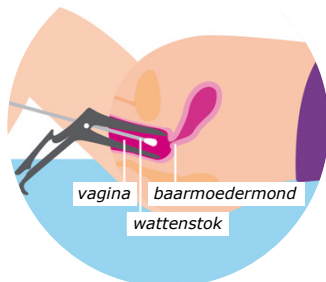
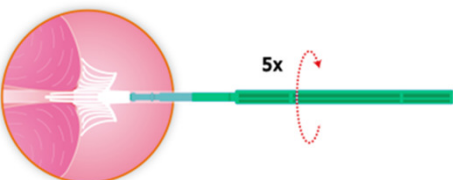
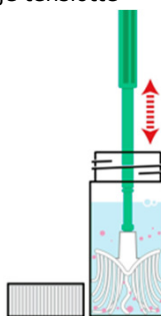
Vorbereiding

Gebruik het laboratoriumformulier voor het bevolkingsonderzoek dat door de screeningsorganisatie ter beschikking is gesteld middels het huisartsenportaal**. Aanvragen op andere formulieren mogen niet in behandeling worden genomen.

- 1 Zet alles klaar voor de procedure begint.
- 2 Plak de 1e barcodesticker van de uitnodigingsbrief horizontaal over het etiket op het potje. Laat de open ruimte op het potje vrij en **let op de positionering van het barcode-etiket**. Plak de 2e barcodesticker van de uitnodigingsbrief rechtsboven op het laboratoriumformulier.



Afname

- 3 Breng het speculum in.

- 4 Open het speculum en breng de portio in beeld. Zet hem dan vast.

- 5 Verwijder overtollig slijm met een wattenstok.

- 6 Zorg ervoor dat de witte borstelhaaren in de portio komen. Voor cellen van de binnenkant en de buitenkant van de portio. Draai de Cervexbrush 5 x rond (draai met de klok mee).

- 7 Doe de afgenomen cellen in het potje en stamp met de Cervexbrush 10x op de bodem. Draai het borsteltje tenslotte krachtig rond zodat al het materiaal vrijkomt. Laat de Cervexbrush niet achter in het potje!

- 8 Draai het dopje er zodanig op dat de zwarte markeringslijn op het dopje de zwarte markeringslijn op het potje passeert. **Het dopje niet te hard aandraaien!**


Verzendklaar maken en verzenden

- 9 Check of het laboratoriumformulier volledig is ingevuld.
- 10 Zorg dat het potje en het laboratoriumformulier samen in een SafetyBag worden aangeleverd.
- 11 Zet het BVO-materiaal in uw praktijk klaar voor transport naar het screeningslaboratorium.

De koerier komt het materiaal volgens afspraak wekelijks ophalen.



* Deze afname-instructie is afgeleid van de NHG-praktijkhandleiding en de scholing cervixscreening (www.scholing-cervixscreening.nl).

** Laboratoriumformulieren kunnen worden aangevraagd op: <https://huisartsenportaal.landelijkescreeening.nl>

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Instructie gebruik laboratoriumformulier en stickers

Huisartsenportaal bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Via het Huisartsenportaal vraagt u laboratoriumformulieren aan voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Ga hiervoor naar: <https://huisartsenportaal.landelijkescreeening.nl>. Het screeningslaboratorium zorgt ervoor dat u tijdig het benodigde uitstrijk materiaal ontvangt op de in het Huisartsenportaal geregistreerde locatie.



Uitnodigingsbrief en barcodestickers

De uitnodigingsbrief die de vrouw van de screeningsorganisatie ontvangt voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft nu onderaan twee stickers met een barcode. Eén sticker komt op het bevolkingsonderzoek laboratoriumpotje en de andere sticker komt op het bevolkingsonderzoek laboratoriumformulier.



Laboratoriumpotje bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

- Gebruik voor het bevolkingsonderzoek uitsluitend het potje dat door het screeningslaboratorium ter beschikking is gesteld.
- Verwijder de verzegeling van het potje. Plak de 1^e barcodesticker van de uitnodigingsbrief van de vrouw horizontaal **over het etiket** op het potje (zie foto).
- foto). Plak de barcodesticker niet over de open ruimte. Zo kan het laboratorium goed zien of er voldoende vloeistof in het potje zit.



✓ Goed



✗ Fout



Laboratoriumformulier bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

- Gebruik het laboratoriumformulier dat door de screeningsorganisatie ter beschikking is gesteld.
- Vul het laboratoriumformulier volledig in.
- Plak de barcodesticker van de uitnodigingsbrief van de vrouw rechtsboven op het laboratoriumformulier (zie foto).



Na afname uitstrijkje

- Het is belangrijk dat het laboratoriumformulier en het potje samen worden aangeleverd bij het laboratorium.
- Bewaar het laboratoriumpotje bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker conform de richtlijnen van het laboratorium.
- Zet het afnamepotje en het laboratoriumformulier verzendklaar volgens de instructies van het laboratorium.